




NU.Q[®] VET CANCER TEST

Lo que el veterinario
debe saber



Qué es el NU.Q[®] Cancer Test?

El NU.Q[®] Cancer Test es una prueba de tamizaje en sangre, una biopsia líquida. Mide Nucleosomas, que son fragmentos de ADN liberados al torrente sanguíneo por las células neoplásicas. Los niveles de Nucleosomas son bajos en pacientes sanos y altos en pacientes con ciertos tipos de cáncer.

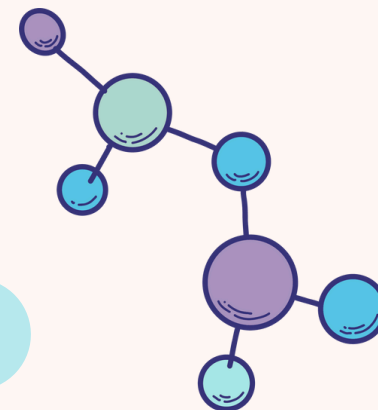

Qué se puede detectar y qué no con este test?

Este test nos ayuda a detectar 7 de las neoplasias
más comunes en perros y gatos:

77% de los Linfomas

82% de los Hemangiosarcomas


54% de los Sarcomas Histiocíticos

con un 97% de especificidad.

Los estudios también indican que puede detectar
Mastocitomas, Osteosarcomas, Melanomas y STB.

Esta herramienta diagnóstica no es Pronóstica, es
decir, que un resultado elevado no indica
enfermedad avanzada o sobrevida corta.


Los resultados deben ser evaluados integralmente
en el contexto de cada paciente por el oncológico,
no de forma aislada o como único elemento
diagnóstico.

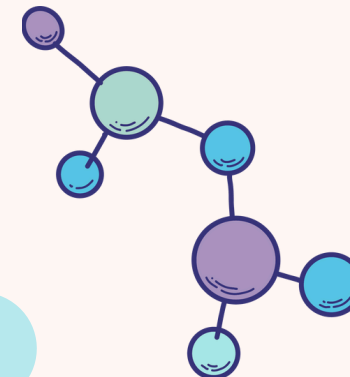


Cuándo es recomendado ordenar y realizar este test?

Se recomienda utilizarlo como una herramienta de tamizaje:


- 1. En pacientes de más de 7 años (geriátricos)**
- 2. En pacientes de razas de alto riesgo desde los 4 años**
- 3. Como tamizaje durante la consulta oncológica**
- 4. En pacientes oncológicos en tratamiento**
- 5. Bianual como control en pacientes oncológicos**
- 6. Como diferencial en diagnósticos complejos en pacientes con signología y exámenes inespecíficos**

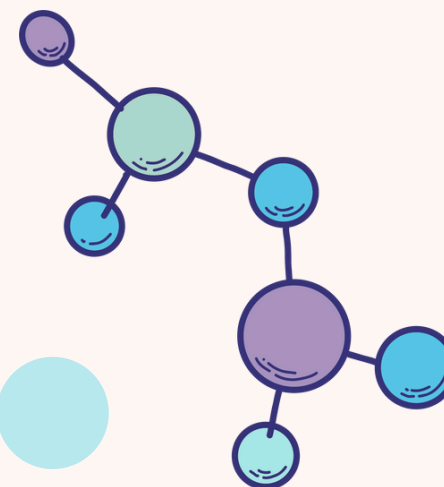

Razas de Alto Riesgo Oncológico

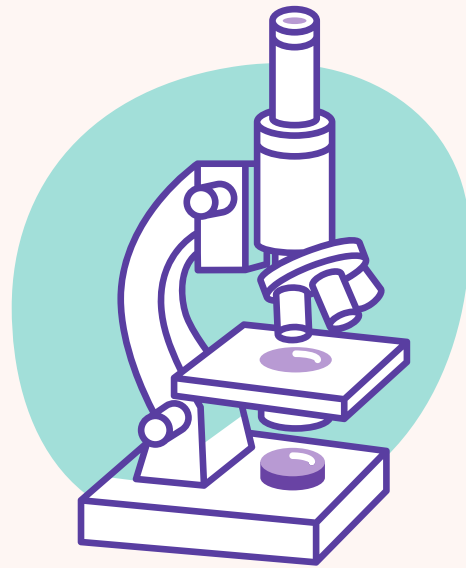


- Labrador Retriever
- Bulldog Francés
- Pug
- Cocker
- Golden Retriever
- Pastor Alemán
- Beagle
- Rottweiler
- Corgi
- Gran Danés
- Schnauzer mini
- Husky
- Bernese
- Boxer
- Pittbull y otros Bullies

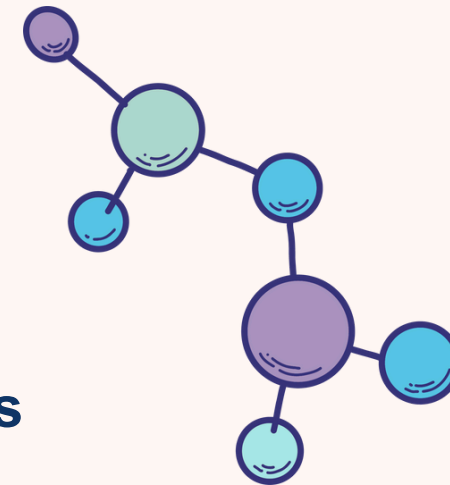

En qué países esta disponible este test?

- Canadá y USA
- Australia
- China, Japón
- Singapoure
- Turquía
- Alemania
- Francia
- España
- Reino Unido
- Portugal
- Bélgica
- Italia y 10 países mas de Europa

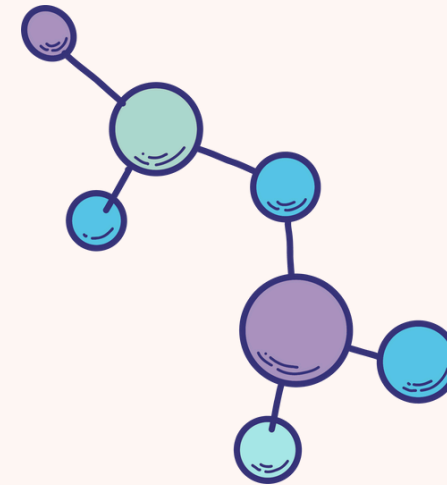

Y AHORA TAMBIÉN EN PANAMÁ!!

ÚNICOS EN LATAM

Dónde puedo realizar este test? Qué necesito para realizarlo?

Este test está por primera vez en Latinoamérica y de forma exclusiva en Panamá en ONCOLOGIA ANIMAL y en ZOOVET Laboratorio Clínico Veterinario.

Se requiere referencia médica u orden firmada y sellada por un médico veterinario idóneo.

Se necesitan 2 ml de plasma obtenido en tubos con EDTA, separado antes de 60min de extraída la sangre, para evitar falsas elevaciones por degradación celular. Muestras hemolizadas o lipémicas no funcionan.

Los resultados se pueden obtener el mismo día o en máximo 24hr






NU.Q[®] VET CANCER TEST



Siempre con lo último en
diagnóstico y tratamiento
oncológico veterinario
en Panamá

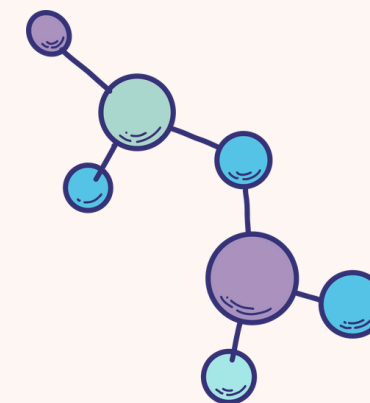



TIENES CONSULTAS Y PREGUNTAS SOBRE ESTE TEST??

Comunícate conmigo!

oncologiaanimalpty@gmail.com

www.grupozoovet.com/oncologia

